

eHeater

Sistema di otturazione Canalare



eHeater

Sistema di otturazione canalare

Ideale per compattare la gutta-percha e sigillare i canali radicolari in modo efficiente, migliorando la qualità del trattamento Endodontico e aumentando il successo a lungo termine.



Controllo della temperatura di lavoro:

il riscaldamento della gutta-percha viene attivato solo quando necessario, riducendo il rischio di eccessivo calore nella cavità orale;

Adattamento alla morfologia del canale:

la tecnica di compattazione verticale consente di seguire la forma anatomica del canale, anche in quelli curvi o con particolari irregolarità.

Eliminazione di vuoti e micro-spazi:

la gutta-percha riscaldata e compattata si adatta meglio alla forma del canale, riducendo al minimo la presenza di vuoti o micro-spazi che potrebbero favorire il passaggio di batteri e causare infezioni.

Sigillo apicale eccellente:

eHeater permette di ottenere un sigillo apicale molto preciso utilizzando gutta-percha riscaldata, che aderisce perfettamente alle pareti del canale radicolare.

Miglior comfort del paziente:

la precisione della tecnica riduce la possibilità di complicazioni post-operatorie, come dolori o infezioni ricorrenti.



Controllo della temperatura di lavoro:

dopo 5 secondi l'ago entra automaticamente in modalità raffreddamento.



Batteria 2600 mAh:

garantisce un utilizzo prolungato. Ricarica completa in 3 ore.



Riscaldamento rapido della punta:

raggiunge 200°C in 2 secondi



Controllo Wireless (Opzionale):

comando a pedale wireless fino a 5m



Luce frontale:

la luce LED consente di vedere meglio all'interno della cavità orale

Confezionamento kit

(Ref. BONSRCH1000)


n.1 eHeater

n.4 Pluggers orientabili:

- n.1 pz. **40/04**
- n.1 pz. **45/04**
- n.1 pz. **50/04**
- n.1 pz. **55/08**

n.1 Adattatore

n.1 Base di ricarica

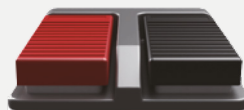

Controllo Wireless (Opzionale):
comando a pedale wireless fino a 5m
(Ref. BONPNM000101110001)



Guarda il video