

eFiller

Sistema di otturazione Canalare



eFiller

Sistema di otturazione canalare

Dispositivo che riscalda la guttaperca in forma solida, rendendola fluida e facile da iniettare nei canali radicolari garantendo una chiusura tridimensionale efficace e uniforme.



Efficienza e velocità:

eFiller permette di lavorare rapidamente e con efficienza, riducendo i tempi complessivi della procedura endodontica.

Controllo del volume di materiale:

il riempimento controllato consente di aggiungere il materiale gradualmente, minimizzando il rischio di estrusione oltre l'apice radicolare;

Sigillatura tridimensionale ottimale:

il sistema Backfill permette di riempire in modo ottimale la porzione coronale del canale con guttaperca fluida, la viscosità ottimale della guttaperca assicura la condensazione verticale e il riempimento di tutti i canali compresi quelli accessori.


Ergonomia:

design studiato per essere comodo da usare, permettendo all'operatore di maneggiarlo con facilità e senza fatica.



Controllo della temperatura di lavoro:

il dispositivo mantiene la guttaperca alla giusta consistenza senza rischiare di danneggiarla.

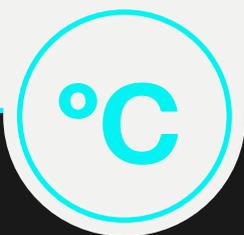

4 temperature di lavoro:

range di temperatura più ampio, adatto alla maggior parte delle punte di guttaperca sul mercato.



Riscaldamento rapido:

tempo di fusione
14 secondi



Design ergonomico:

sensazione di equilibrio
e comfort



4 aghi riutilizzabili:

(23G 24mm, 23G 28mm,
25G 24mm, 25G 28mm)
inclusi nel kit.

Confezionamento kit

(Ref. BONSRCF1000)

n.1 eFiller

n.1 Chiave

n.1 Pistone

n.1 Spazzola per la pulizia

n.3 cappucci in silicone

n.1 Cavo di ricarica

n.1 Base di ricarica

n.4 aghi nelle seguenti misure:

- n.1 pz. **23G** misura **24 mm**
- n.1 pz. **23G** misura **28 mm**
- n.1 pz. **25G** misura **24 mm**
- n.1 pz. **25G** misura **28 mm**



Accessori

Guttaperca (conf. 100pz.)

(Ref. BONDUDGO000025000)



Guarda il video