

Actor I Pro

Attivatore di irrigazione ad ultrasuoni wireless



Actor I Pro

Attivatore di irrigazione ad ultrasuoni wireless

Progettato per migliorare l'efficacia dell'irrigazione canalare durante i trattamenti Endodontici.



Ergonomia:

design ergonomico e leggero, facile da impugnare e maneggiare per un utilizzo preciso durante il trattamento endodontico.

Detersione dei canali radicolari ottimale

favorisce una detersione più profonda e completa del sistema canalare migliorando la rimozione del biofilm batterico e dei detriti.

Tecnologia a ultrasuoni silenziosa:


piccola ampiezza delle onde ma ottima potenza. Meno rumore. L'ampiezza della vibrazione della punta può essere regolata in modo da non danneggiare il canale radicolare. La sequenza può essere regolata per garantire l'efficienza della pulizia.

Tempo di lavoro:

utilizzare il dispositivo per 30-60 secondi alla volta alternando le due potenze di lavoro. Dopo 3 minuti di lavoro continuo il dispositivo entra in stand-by automaticamente. Viene emesso un segnale acustico ogni 5 secondi per temporizzare il lavoro.




2 potenze di lavoro:
modalità normale e ad alta potenza.

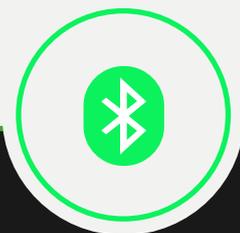

Bluetooth:
dotato di un pulsante Bluetooth con indicatore luminoso bluetooth integrato per il collegamento al pedale wireless.



Luce frontale:
offre una migliore visione della cavità orale

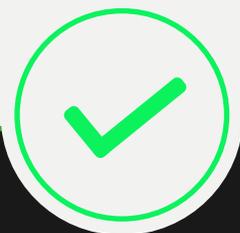

Punta in metallo

Confezionamento kit

(Ref. BONSRCW2000)

n.1 Actor I Pro irrigatore

n.1 base di appoggio e ricarica

n.3 cappucci di protezione

n.1 set di 6 inserti:

- n.3 pz. **2002/21**

- n.3 pz. **2502/18**



Controllo Wireless (Opzionale):

30-60 secondi alla volta alternando la modalità normale e ad alta potenza. Comando a pedale wireless fino a 5m. (Ref. BONPBM000101110001)



Guarda il video