


CARESTRAM DENTAL
PELLICOLE CLINASEPT



CARESTRAM DENTAL PELLICOLE CLINASEPT

Una barriera
integrata per la
gestione ed il
controllo delle
infezioni.

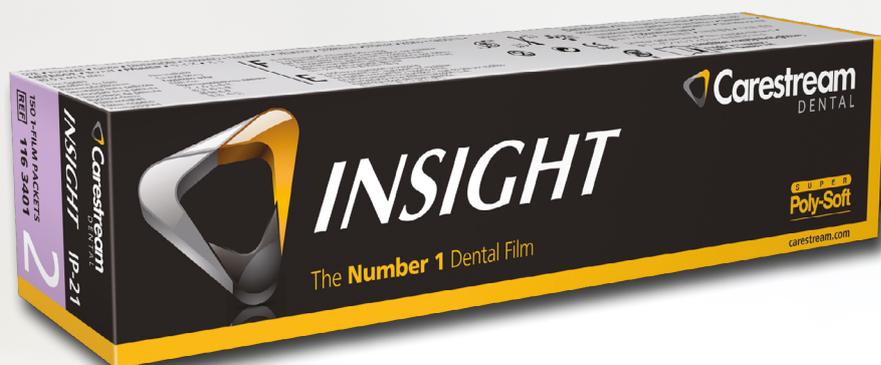

Le pellicole INSIGHT con barriera ClinAsept hanno una barriera integrata per la gestione ed il controllo delle infezioni.

Ogni pellicola è racchiusa in una barriera trasparente che la protegge contro contaminazioni che possono essere presenti nei liquidi orali.

Utilizzare questi prodotti può ridurre al minimo il rischio di contaminazione incrociata nel tuo studio dentistico.

Minimizzare la contaminazione crociata e massimizzare il comfort

Per un reale risparmio di tempo in totale tranquillità, utilizza le pellicole INSIGHT con la barriera ClinAsept.

Disponibile in formato a film singolo per dimensione 2, ogni pellicola è preconfezionata in modo sicuro con una propria barriera.

Non devi fare nulla in più prima di fare la radiografia, tranne sentirti sicuro che il rischio di contaminazione incrociata nella camera oscura sia ridotto al minimo.

Superiore qualità d'immagine

Con le pellicole INSIGHT non è necessario rinunciare alla qualità dell'immagine a favore della riduzione della dose di radiazioni.

Questa pellicola è stata sviluppata utilizzando emulsione T-Grain. I suoi grani di alogenuro d'argento appiattiti utilizzano i raggi X in modo più efficiente e consentono alla pellicola di trattenere il contrasto in modo più efficace nelle soluzioni di elaborazione stagionate.

È possibile ottenere immagini nitide e ad alto contrasto rispetto alle pellicole più lente della concorrenza e le radiazioni possono essere ridotte fino al 60%.

Pellicola INSIGHT con barriera ClinAsept

Codice	Misura	Quantità per confezione	Cod. prodotto
Pellicola INSIGHT con barriera ClinAsept	Size 2 (3.1 x 4.1 cm)	100 1-film packets	KD 153 9931

