


Soft-Core[®]

Otturatore endodontico

La scelta vincente per l'otturazione tridimensionale

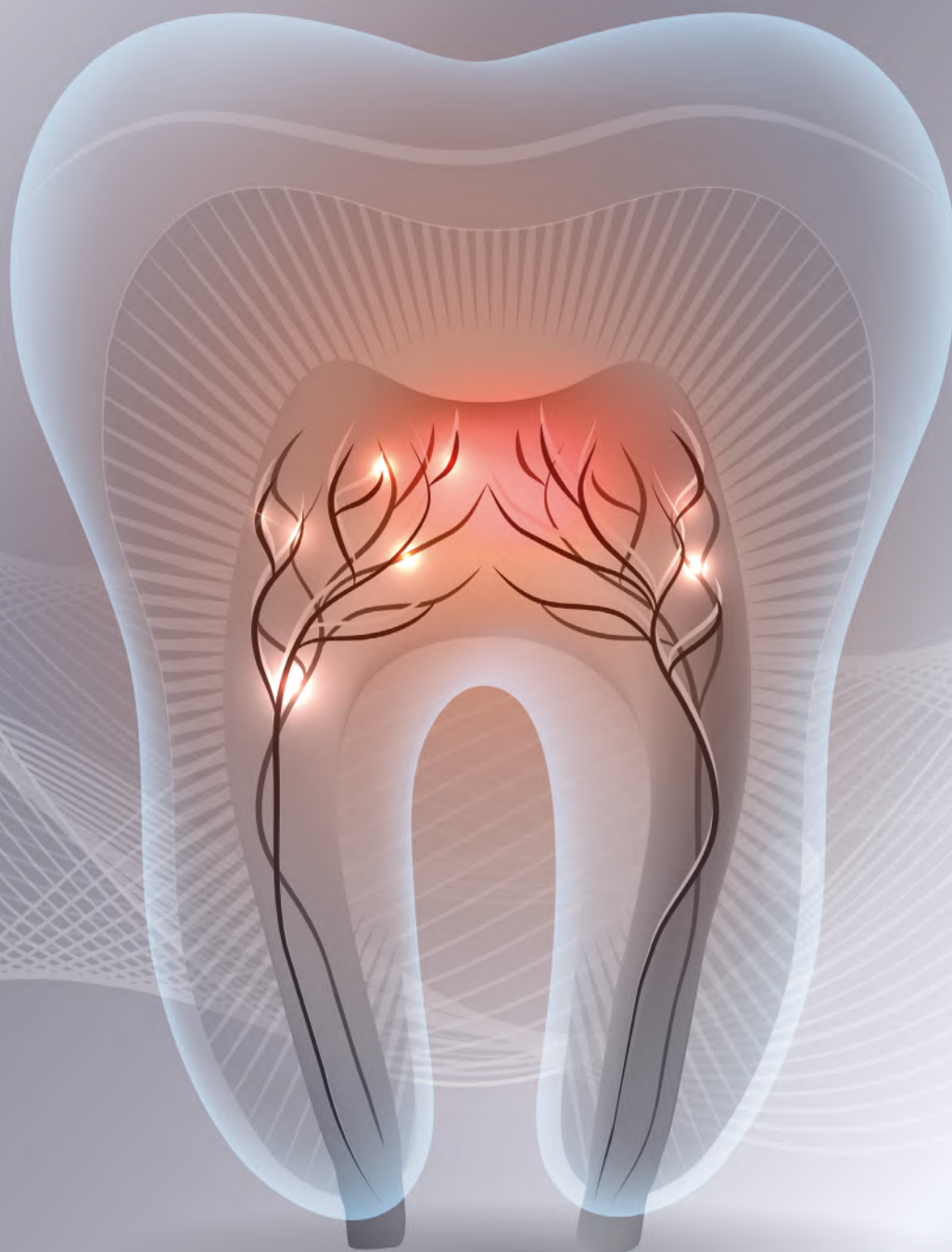

CMS Dental
Our Innovation Your Success

Soft-Core®

Otturatore endodontico

Un nucleo polimerico radiopaco con una guttaperca termoplastica



Vantaggi

- La flessibilità rende possibile il riempimento anche dei canali radicolari più impegnativi
- Veloce, efficiente, affidabile
- Compatibile con qualsiasi conicità della preparazione del canale radicolare
- Il carrier centrale più sottile garantisce un riempimento più uniforme ed omogeneo di guttaperca
- Adatto al riempimento di canali stretti, curvi e lunghi
- Facile da usare e semplice rimozione del manico dalla guttaperca tramite rotazione
- Clinicamente testato da oltre 18 anni



Soft-Core®

Fornetto



Vantaggi

- Riscaldamento istantaneo
- Possibilità di scaldare 4 otturatori contemporaneamente
- Mantiene gli otturatori caldi e pronti all'uso per 15 minuti

Un canale radicolare otturato tridimensionalmente significa che anche eventuali canali laterali e canali accessori sono stati riempiti correttamente.

Il design unico dell'otturatore endodontico Soft-Core® lo rende la scelta ideale per diversi motivi:

- L'impugnatura dell'otturatore può essere piegata per facilitare il trattamento dei denti posteriori.
- Il carrier è coperto con guttaperca flow.
- Un singolo otturatore riempie l'intero canale e, grazie alla forza idraulica, la guttaperca calda viene portata facilmente in apice.
- L'otturatore ha un sottile carrier ovale che fornisce un eccellente afflusso della guttaperca coronalmente.

Il carrier degli **otturatori Soft-Core®** è più sottile rispetto ai principali otturatori carrier-based in commercio, consentendo una maggiore flessibilità per il posizionamento anche nei canali più curvi.

Un carrier più sottile significa anche più guttaperca per avere ogni volta riempimenti più densi


Guttaperca naturale

La **guttaperca Natural GP™** utilizzata per il nostro otturatore endodontico **Soft-Core®** viene lavorata con gomma grezza naturale raccolta da alberi della gomma indonesiani.

Tutta la produzione viene eseguita da **CMS Dental A/S in Danimarca** secondo specifiche tecniche esatte.

Gli ingredienti della **guttaperca Natural GP™** sono privi di componenti tossici.

Ogni fase di produzione per ogni lotto di **Natural GP™** è rigorosamente controllata per garantire una qualità ottimale del prodotto.

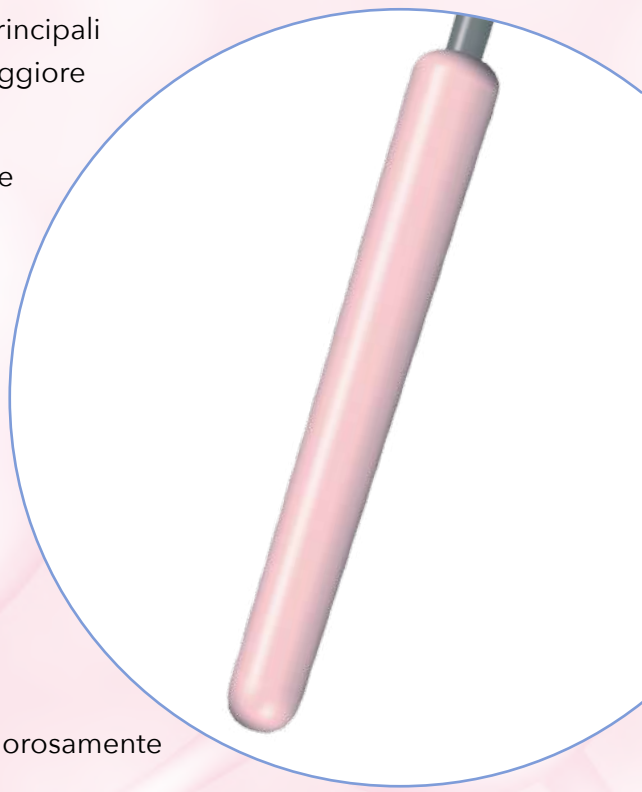

CODICE ARTICOLO SIMIT	DESCRIZIONE ARTICOLO
CMSSCR6/20	Soft-Core Otturatore 20 - box 6 pz
CMSSCR6/25	Soft-Core Otturatore 25 - box 6 pz
CMSSCR6/30	Soft-Core Otturatore 30 - box 6 pz
CMSSCR6/35	Soft-Core Otturatore 35 - box 6 pz
CMSSCR6/40	Soft-Core Otturatore 40 - box 6 pz
CMSSCR6/45	Soft-Core Otturatore 45 - box 6 pz
CMSSCR6/50	Soft-Core Otturatore 50 - box 6 pz
CMSSCR6/55	Soft-Core Otturatore 55 - box 6 pz
CMSSCR6/60	Soft-Core Otturatore 60 - box 6 pz
CMSSSV6/20	Soft-Core Size Verifier 20 - box 6 pz
CMSSSV6/25	Soft-Core Size Verifier 25 - box 6 pz
CMSSSV6/30	Soft-Core Size Verifier 30 - box 6 pz
CMSSSV6/35	Soft-Core Size Verifier 35 - box 6 pz
CMSSSV6/40	Soft-Core Size Verifier 40 - box 6 pz
CMSSSV6/45	Soft-Core Size Verifier 45 - box 6 pz
CMSSSV6/50	Soft-Core Size Verifier 50 - box 6 pz
CMSSSV6/55	Soft-Core Size Verifier 55 - box 6 pz
CMSSSV6/60	Soft-Core Size Verifier 60 - box 6 pz
FORNETTO	
CMSSCDTINT/EU/R20-30	Soft-Core Intro Kit
CMSSCDTO/EU	CMS Soft-Core Fornetto



**Soft-Core®
Otturatore**



**Soft-Core®
Verifier**



**Soft-Core®
Fornetto
Intro kit**